

Das sagen unsere Kunden:

„Ich habe
Jahre lang an
Lippenherpes
gelitten, ...
Herpotherm® ist
das Einzige, das
mir hilft.“

„Wer es einmal
versucht hat,
bleibt dabei
und schwört
darauf!“

„Besser als
alle Cremes!“

„Ein top Produkt
mit einem sehr
guten Preis-
Leistungs-
verhältnis.“

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Germany

Telefon: +49 (89) 6 41 86-0
Telefax: +49 (89) 6 41 86-130
e-Mail: service@dermapharm.de

herpotherm.de

Besuchen
Sie uns auf

facebook

[facebook.com/
herpotherm](https://www.facebook.com/herpotherm)

HERPOtherm®

STOP

Der heiße Tipp
gegen Herpes:
Herpotherm®

Wirkt ausschließlich mit
konzentrierter Wärme.





herpotherm.de

Der heiße Tipp gegen Herpes

Herpotherm® kann bei rechtzeitiger Anwendung Herpesbläschen komplett verhindern.

Falls die Herpesbläschen doch einmal ausbrechen sollten, kann Herpotherm® im Vergleich zu aciclovirhaltigen Cremes die Symptome schneller lindern und die Heilung beschleunigen.¹

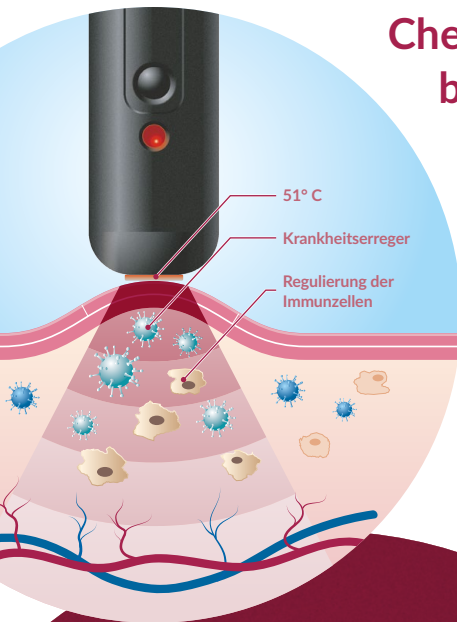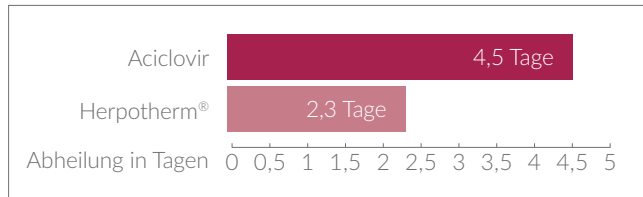

Chemiefrei behandeln

Es wird vermutet, dass der Wärmeeinfluss im Bereich von 51°C die Ausschüttung von Histamin und Abbauenzymen positiv beeinflusst und somit die Entzündungsreaktion dämpft.

- ✓ Chemiefrei – auch für Schwangere, Allergiker und Kinder geeignet²
- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Patentiertes Medizinprodukt, „Made in Germany“

¹ The use of local concentrated heat versus topical acyclovir for a herpes labialis outbreak; J. Wohlrab et al. in Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013;6

² Eigenanwendung ab 12 Jahren

Einfache Anwendung

Die Anwendung von Herpotherm® ist sehr einfach. Zuerst wird das Gerät auf dem betroffenen Hautareal platziert und leicht angedrückt. Nach Betätigen des Drucktaste erwärmt sich die keramische Kontaktfläche auf ca. 51° C. Diese wird für eine Dauer von drei Sekunden aufrechterhalten, bevor sich Herpotherm® automatisch abschaltet.



Die Anwendung von Herpotherm® ist diskret und hinterlässt keine Spuren auf der Haut. Durch die völlig chemiefreie Behandlung können unerwünschte Nebenwirkungen von Tabletten und Salben vermieden werden und somit eignet sich Herpotherm® hervorragend für Schwangere, Allergiker und Kinder*.



* Eigenanwendung ab 12 Jahren



Der heiße Tipp gegen Herpes

Herpotherm® kann bei rechtzeitiger Anwendung Herpesbläschen komplett verhindern.

Falls die Herpesbläschen doch einmal ausbrechen sollten, kann Herpotherm® im Vergleich zu aciclovirhaltigen Cremes die Symptome schneller lindern und die Heilung beschleunigen.¹

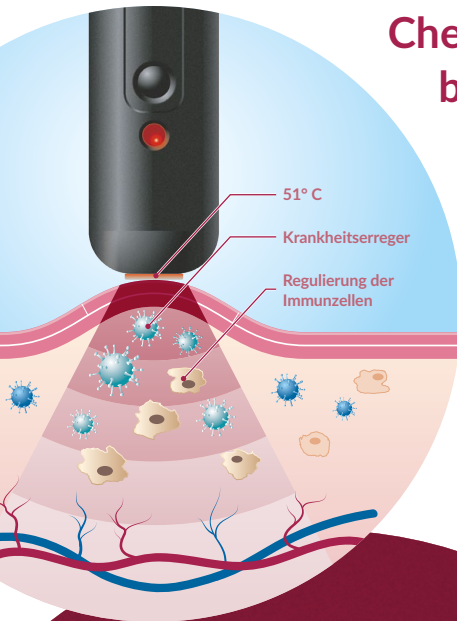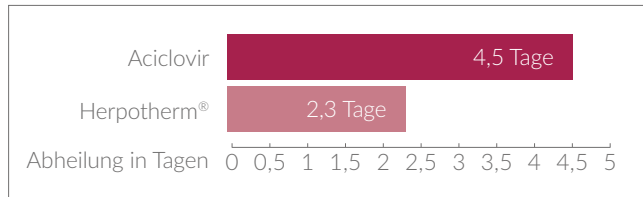

Chemiefrei behandeln

Es wird vermutet, dass der Wärmeeinfluss im Bereich von 51°C die Ausschüttung von Histamin und Abbauenzymen positiv beeinflusst und somit die Entzündungsreaktion dämpft.


- ✓ Chemiefrei – auch für Schwangere, Allergiker und Kinder geeignet²
- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Patentiertes Medizinprodukt, „Made in Germany“

¹ The use of local concentrated heat versus topical acyclovir for a herpes labialis outbreak; J. Wohlrab et al. in Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013;6

² Eigenanwendung ab 12 Jahren

Einfache Anwendung

Die Anwendung von Herpotherm® ist sehr einfach. Zuerst wird das Gerät auf dem betroffenen Hautareal platziert und leicht angedrückt. Nach Betätigen des Drucktaste erwärmt sich die keramische Kontaktfläche auf ca. 51° C. Diese wird für eine Dauer von drei Sekunden aufrechterhalten, bevor sich Herpotherm® automatisch abschaltet.

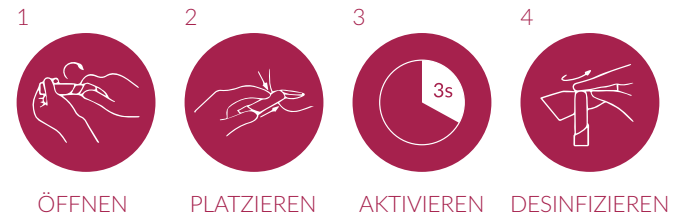

Die Anwendung von Herpotherm® ist diskret und hinterlässt keine Spuren auf der Haut. Durch die völlig chemiefreie Behandlung können unerwünschte Nebenwirkungen von Tabletten und Salben vermieden werden und somit eignet sich Herpotherm® hervorragend für Schwangere, Allergiker und Kinder*.

* Eigenanwendung ab 12 Jahren

